

LIT X'PRESS



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN VIGEUR.



Le 1^{er} lit autoportant sans kit de transport.



• **Unique, pratique** : le 1^{er} lit autoportant sans kit de transport.




• **Écologique** : n'entassez-plus des chariots inutiles !




• **Extrêmement maniable** : le lit plié se déplace sur ses propres roues d'un diamètre de 100 mm, le franchissement d'obstacle est nettement optimisé.

• **Facile** : montage rapide, sans outil en moins de 3 minutes.



• **NF HAD**  NFEN 1970 (2000) et son amendement A1 (2005).

• **NF Hébergement Médicalisé** (suivant option).


 NFEN 60601-2.38 (1999) et son amendement A1 (2006).



Idéal pour le domicile
En 3 minutes, le lit X'PRESS se déplace à la verticale, sans outil



Lit X'PRESS existe en 3 versions : 2 et 3 fonctions électriques avec ou sans plicature.

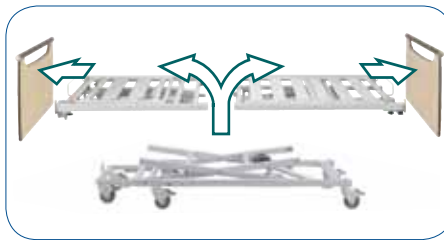

Oter les panneaux, le relève buste puis le relève jambes.



Soulevez légèrement le croisillon pour remonter la base.


LE LIT X'PRESS : CONFIGURABLE ET ÉVOLUTIF (options possibles)



Relève-buste électrique (d'origine).



Relève-jambes manuel à crémaillères.

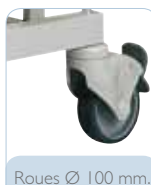

Roues Ø 100 mm.

Freinage indépendant sur chaque roue du lit



Larges lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Rallonge de sommier de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	AMPLITUDE	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	CHARGE MAXIMALE SOULEVÉE	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
X'PRESS 2 fonctions	90 x 200 cm sommier divisible	33 à 83 cm	70 °	12° crémaillères	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	250 kg	Ø100 mm à freins sans pare fil	EN 60601-1 ISO 13485 CE NFEN 1970/A1	Motorisation, boîtier, télécommande LINAK IP66 VO
X'PRESS 3 fonctions sans plicature des genoux				13,5 ° électrique					
X'PRESS 3 fonctions avec plicature des genoux				Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères					
Accessoires	Potence d'angle époxy Barrières pliantes VISION époxy Panneaux Abélia								

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

MÉDICATLANTIC
WINCARE
G R O U P E