



LIT X'PRIM EVOLUTION



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR.

- **Ergonomique** : sa très large amplitude de mouvements de 33 à 83 cm facilite le transfert et le travail des soignants.
- **Robuste** : des matériaux et une motorisation LINAK, garantis 5 ans.
- **Facile à transporter** grâce à son kit de transport.
- **Léger** : chaque élément pèse moins de 25 kg.
- **Esthétique** : un grand choix de panneaux permet de l'intégrer facilement à tous les intérieurs.
- **NF HAD**  NFEN 1970 (2000) et son amendement A1 (2005).
- **NF Hébergement Médicalisé** (suivant option).  NFEN 60601-2.38 (1999) et son amendement A1 (2006).



ÉTAPE N°1 : Choisissez la base du lit selon la hauteur variable




ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit


LE RELÈVE-BUSTE : différentes versions de relèvement de buste peuvent être choisies.



Relève-buste électrique (d'origine).

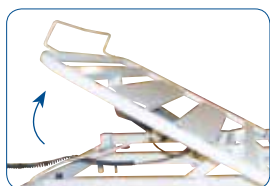

Relève-buste à translation. Il permet d'éviter le glissement avant.

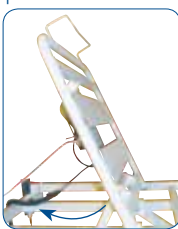

Débrayage d'urgence du relèvement de buste accessible en tête et des 2 côtés du lit.

LE RELÈVE-JAMBES : différentes versions de relèvement de jambes peuvent être choisies.



Relève-jambes manuel à crémaillères.



Relève-jambes électrique.



Relève-jambes électrique avec plicature.




LE FREINAGE



Roues Ø 100 mm.

Freinage indépendant sur chaque roue du lit

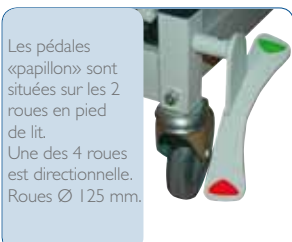

Les pédales «papillon» sont situées sur les 2 roues en pied de lit. Une des 4 roues est directionnelle. Roues Ø 125 mm.

Freinage centralisé

LE COUCHAGE : le plan de couchage est constitué de lattes. Vous pouvez choisir entre :



Larges lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Larges lattes amovibles en résine acrylique M2. Conçues pour plus de confort, d'hygiène, elles garantissent une anti-corrosion absolue.

ACCESSOIRES



Rallonge de sommier de 20 cm.



Prise d'équipotentialité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS SANS PANNEAU	RB	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	CHARGE MAXIMALE SOULEVÉE	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
X'PRIM EVOLUTION 2 fonctions électriques	90 x 200 cm sommier divisible	68 kg	70°	12° crémaillères	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	250 kg	Ø 100 mm à freins sans pare fil	EN 60601-1 EN 60601-1-2 NF EN 1970/A1 ISO 13485 CE NF EN 60601-2-38/A1	Motorisation, boîtier, télécommande LINAK IP66 ou IP54 V0
3 fonctions électriques sans plicature		73 kg		13,5° électrique					
3 fonctions électriques avec plicature		73 kg		Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères					
Accessoires	Potence d'angle époxy (cf. fiche accessoires)								
	Barrières pliantes VISION époxy (cf. fiche accessoires)								
	Panneaux Abélia (cf. fiches panneaux et nuanciers)								

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.