

LETTO ALDRYS'EVOLUTION II



QUESTO PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE. È STATO CONCEPITO E FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME CEI60601-2-52.

- **Regolazione in altezza imbattibile:** da 22 a 78 cm. Sicura per i pazienti, confortevole per gli operatori sanitari.
- **Passaggio sotto il letto ottimizzato.**
- **Solidità:** garanzia di 5 anni sui materiali e sulla motorizzazione LINAK.
- **Estetica e comfort:** pannelli colorati e "capitonné" per offrire ai pazienti un riferimento visivo e una maggiore sicurezza in caso di urto.



Reinventare l'assistenza delle persone anziane

FASE N° 1: Scegliere la base del letto a seconda dell'altezza



FASE N° 2: Scegliere la configurazione del letto


IL ALZABUSTO: potete scegliere fra varie versioni di alzabusto.



Alzabusto elettrico (originale).



Alzabusto a traslazione. Permette di evitare uno scivolamento in avanti.

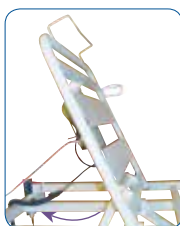

Sgancio d'emergenza del alzabusto accessibile dalla testata e dai 2 lati del letto.

IL ALZAGAMBE: potete scegliere fra varie versioni di alzagambe.



Alzagambe manuale a guide dentate.



Alzagambe elettrico.



Alzagambe elettrico con piegatura.



IL FRENO



Ruote Ø 75 mm.

Freno indipendente su ogni ruota del letto



Posizione bloccata. Posizione sbloccata.

Il pedale unico si trova ai piedi del letto in posizione centrale. Ruote Ø 100 mm.

Freno centralizzato



IL PIANO BASE: il piano base è costituito da doghe. Potete scegliere fra:




Ampie doghe in metallo saldate. Sono concepite per una facile manutenzione.



Ampie doghe staccabili in resina acrilica M2. Concepite per un maggior livello di comfort e igiene, garantiscono un'assoluta protezione anticorrosione.

ACCESSORI

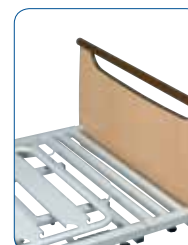

Presse equipotenziale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DENOMINAZIONE	DIMENSIONI	PESO SENZA PANNELLO	RB	ALZAGAMBE	CARICO NORMALE DI UTILIZZO	RUOTE	NORME	IMPERMEABILITÀ
ALDRYS[®] EVOLUTION II 2 funzioni elettriche 3 funzioni elettriche senza piegatura 3 funzioni elettriche con piegatura	90 x 200 cm sezione testa divisibile	82 kg	70°	12° guide dentate	170 kg materasso 20 kg paziente 135 kg accessori 15 kg	Ø 75 mm con freno senza parafili	CEI 60601-2-52	Motorizzazione e cambio, LINAK IP66 Telecomando LINAK IP54
		87 kg		Piegatura dei giunti 26° (cosce)				
		87 kg		e 16° regolazione dei piedi mediante guide dentate				
Accessori	Alzamalati in epossidico (v. scheda accessori)							
	Sponde laterali ALDRYS in epossidico (v. scheda accessori)							
	Pannelli Abélia (v. schede pannelli e sistemi colori)							

- 2 supporti per accessori (sui lati lunghi).
- 2 supporti per asta porta-flebo (alla testata del letto).
- 2 supporti per alzamalati (alla testata del letto).

Garanzia sulle parti meccaniche, elettriche e sul telecomando 5 anni*. Garanzia sui pannelli e sugli accessori 1 anno*. *In condizioni normali di utilizzo e fatta eccezione per le parti ad usura - vedere le istruzioni per l'uso.

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francia
Tel. : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

Attenta ad un costante miglioramento dei propri prodotti,
MÉDICATLANTIC si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche. Foto non contrattuali.