

Colchão DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

ALOVA[®]

Monobloco, multizona

com zona de apoio para os calcanhares



ZONA DE APOIO PARA OS CALCANHARES INTEGRADA

- **Funcionalidade:** redução dos valores de pressão por diferentes graus de dureza adaptados a cada zona do corpo.
- **Eficácia:** ajuda no tratamento de escaras dos níveis 1 e 2. Melhora o fluxo vascular ao nível dos calcanhares por inclinação integrada na zona dos pés.
- **Segurança:** Redução ao mínimo do risco graças a uma proteção integral tecnicamente comprovada.
- **Conforto:** acompanhamento dos movimentos do corpo.



Opção
com funda CIC



Colchão multizona com zona de apoio para os calcanhares

Espuma viscoelástica

(Altura 6 cm)
Densidade 80 kg/m³

Multizona



Macia dura Média

Firmeza espuma viscoelástica:

- Macia: 1'5 kPa
- Média: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa

VMA64



VMA63



VMA62



Peso do colchão

- VMA62: 14 kg
- VMA63: 15 kg
- VMA64: 16 kg

Base de espuma de alta resiliência


(Altura 8 cm)
Densidade espuma HR:
- VMA62: 18 kg/m³
- VMA63: 28 kg/m³
- VMA64: 34 kg/m³




Com zona de apoio para os calcanhares integrada

- **Redução ótima das pressões nas zonas de risco.** Graças à zona de apoio para os calcanhares e as zonas com firmeza diferenciada.

Exemplo: distribuição das pressões ao nível do calcanhares num paciente de 1,76 m e 70 kg. (Unidade: mm de hg).

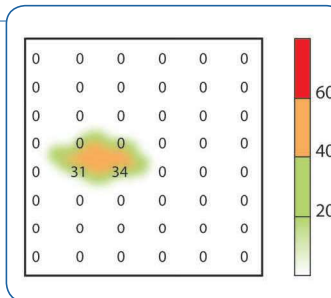

Colchão SEM zona de apoio para os calcanhares.

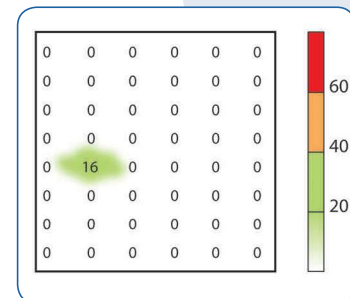

Colchão ALOVA monobloco multizona COM zona de apoio para os calcanhares.

PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar;
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
 - **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.
- Desenrolar antes da data indicada na embalagem (aprox. 6 meses)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO			DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA	PALET BOX (10 unidades)	ENROLADO COMPRIMIDO				
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU	---	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190x88x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D I 90 classe D	80 kg/m ³
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195x88x14	20 a 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	---		20 a 150 kg		
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU HD	VMA63-HIP	VMA63HIP-BOX	VMA63RC1-HIP (1 ud) VMA63RC-HIP (5 ud) VMA63RC1-HIPH3 (1 ud) VMA63RC-HIPH3 (5 ud)	20 a 150 kg			
	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX	VMA63RC1-HIPH3	20 a 180 kg			
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório CIC	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX	VMA64RC1-HIPH (1 ud) VMA64RC-HIPH (5 uds)	20 a 150 Kg			
	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX	---	20 a 180 kg			
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX	---				

Manutenção
Promust PU (HD)
Promust CIC



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.