



axtar **automorpho**[®]
axensor

WIN  CARE



automatic
— technology —
BREVET




AIR CARE

REHA
WASH
SYSTEMS

2
ANS
GARANTIE



Score sur l'Echelle de Braden

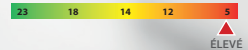

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- ▶ Matelas à air motorisé indiqué dans l'aide à la prévention et le **traitement des escarres de stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.
- ▶ Cible : Patient à risque **MOYEN À ÉLEVÉ**, alité plus de **15 heures par jour**.

L'INNOVATION **axensor**[®] **BREVETÉ**

Technologie Axensor, un système intelligent, autonome et breveté qui permet le calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et de sa position selon l'angulation du relèvement buste sans aucune intervention du soignant.



Le capteur d'ajustement automatique, de la pression de gonflage associé à la technologie **Axensor** permet de modifier en continue son niveau pour l'adapter à la morphologie et à la position du patient selon l'angulation du relèvement-buste



Compresseur compatible avec 5 supports pour mieux répondre aux spécificités du patient.

AT 12

↑  30 ≤ 165kg

AT 15

↑  30 ≤ 180kg

AT 15 DV*

↑  30 ≤ 180kg

AT 20

↑  30 ≤ 200kg

COUSSIN


↑  30 ≤ 150kg



Décharge Talonnière pour soulager les pressions de la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas.

* : DV = Décubitus Ventral

Nouvelle version sans Bluetooth

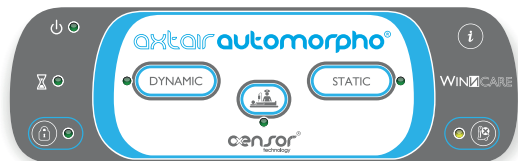

AIR CARE

- ▶ Logiciel fabricant simple d'utilisation pour la **maintenance préventive et curative**
- ▶ **Traçabilité** optimisée et sécurisée

FONCTIONNALITÉS ET BÉNÉFICES

- ▶ Touches tactiles
- ▶ Ergonomique et didactique
- ▶ Verrouillage automatique



BÉNÉFICES

- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ Pas de manipulation superflue pour le soignant
- ▶ Sécurité pour le patient



3 MODES THERAPEUTIQUES

DYNAMIC

MODE « DYNAMIQUE »

Alternance d'une cellule sur deux pour éviter une compression vasculaire prolongée.

STATIC

MODE « STATIQUE »

Permet la prise en charge de personnes nécessitant une immobilisation thérapeutique (fractures, métastases osseuses...), de réaliser des phases de sevrage sur matelas statique.



MODE « SOIN » SÉCURISÉ

Permet de faciliter la manutention du patient lors des soins et des transferts. Temporisation : Après 30 min le système bascule automatiquement dans le mode thérapeutique précédemment sélectionné.

GAMME axlar automorpho® censer

		Supports axlar automorpho® censer sans Bluetooth				
		censer AT12	censer AT15	censer AT15 DV	censer AT20	COUSSIN censer
Référence produit	Pour lit en largeur 80 cm	VAXT6/AUTO-80-S	-	-	VAXT6/AT20-80-S	VAXT6/CO/AUTO
	Pour lit en largeur 90 cm	VAXT6/AUTO-S	VAXT6/MAX-S	VAXT6/MAX-DV-S	VAXT6/AT20-90-S	
		Compresseur axlar automorpho® censer sans Bluetooth				
		VAXT6/POMPE/AUTO-S				