

L'AUTOMATISME POUR LES PREMIERS STADES DE L'ESCARRE




Score sur l'Échelle de Braden



À commander sur le site (35) Miniac-Morvan

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Répond efficacement aux besoins de prévention et traitement des escarres (Stades 1 à 4)
- ▶ 3 modes de fonctionnement (dynamique, statique et soin) et décharge talonnière
- ▶ Différentes largeurs (90/100/120 avec bloc mousse)
- ▶ Poids matelas : ~ 11,8 kg (+ compresseur de 2,2 kg)
- ▶ Mode automatique
- ▶ 3 cellules de tête statique
- ▶ Base mousse de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité
- ▶ Cellules d'air interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur ce qui fait un total de 21 cm
- ▶ Réglage manuel possible pour le confort du patient
- ▶ Largeur 120 : avec bordures stabilisatrices en mousse ferme pour faciliter la sortie de lit et assurer un bon positionnement pendant le coucher

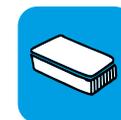

AIRFLOW®
PM100A^{EVO} DIGITAL

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN** à **ÉLEVÉ**.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1** à **4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

40 ≤ 180kg



NORMES FEUX
EN 597 partie 1 & 2



294,64 € TTC Formule achat avec PLV
Forfait location hebdomadaire
CODE - 1276371 -



10,88 € TTC
Forfait location hebdomadaire
CODE - 1237715 -

LES + PRODUIT

- Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l'escarre.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

3 largeurs de lits disponibles 90 | 100 | 120 cm

HOUSSE	LARGEUR DE LIT (cm)	CARTON INDIVIDUEL	MONTÉ LIVRÉ À PLAT	ROULÉ SOUS SAC DE TRANSPORT
CAR TEX	90	826700	826703	826704
	100	826701	—	—
	120	826702	—	—



HOUSSE CARTEX

- ▶ Résistance à la pénétration des effluents biologiques. Perméable à la vapeur d'eau.
- ▶ Barrières renforcées aux micro-organismes.
- ▶ Usage intensif multi-patient.



CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR

- ▶ Bouchon de transport pour une autonomie jusqu'à 2 heures
- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide



CELLULES

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane
- ▶ 8 sont à micro perte d'air indépendantes et amovibles.

QUALITÉ & SOLIDITÉ



VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Ouverture et fermeture simples et rapides
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 20 secondes en cas d'urgence *

* Pour un patient de 80 kg à plat



SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Mousse polyuréthane de haute résilience (HR) de 8 cm de hauteur



3 DÉCHARGES TALONNIÈRES

- ▶ Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas



Facilement mise en décharge grâce à 1 vanne avec mollette

COMPRESSEUR

- Interface graphique intuitive
- 3 modes de fonctionnement

DYNAMIC

Dynamique

STATIC

Statique basse pression



Soins

- Réglage confort

- Verrouillage

Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur

