

# COLCHÃO EPSUS


## Monobloco Mono-sustentação



- **Prescrição:** indicado para pacientes acamados por mais de 15 horas por dia. Ajuda no tratamento das UPP (úlceras por pressão) com estágio 1 e 2 (NPUAP), excluindo a zona de apoio ou com possibilidade de exclusão de apoio.
- **Segurança:** bordas laterais estabilizadoras para facilitar o transporte da cama à cadeira de rodas. Envoltório de proteção Dermalon FR para uso residencial ou Promust PUHD para coletividades.
- **Evolutividade:** possibilidade de remover módulos para aliviar sobretudo a zona dos calcanhares.



VALORES DAS PRESSÕES\* NO COLCHÃO EPSUS CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DOS ESPECIALISTAS (LXI3321)

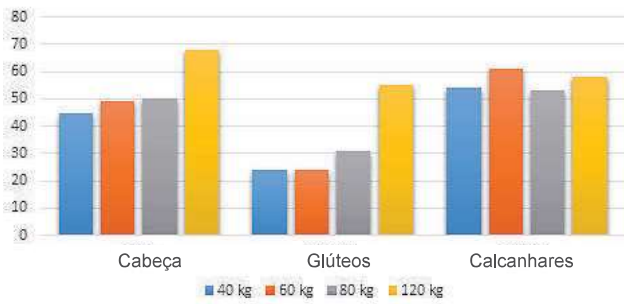

\* Valor máximo da pressão exercida sobre a pele




COLCHÃO EPSUS

- Colchão composto por 8 módulos com blocos de espuma de alta resiliência.
- Espuma de alta resiliência (HR)  $\geq 34\text{Kg/m}^3$ .
- Multizona. Dureza:
  - \* 2'9 kPa (módulos brancos),
  - \* 3'4 kPa (módulos cinzento)
  - \* 3'4 kPa (bordas estabilizantes)
- Peso del Colchão: 10 kg
- Durabilidade medida em 10.000 ciclos no teste do ensaio dinâmico (manequim W44512 – 3BScientific. HxI4042).
- Mobilidade dos blocos nas 4 dimensões.
- Bordas arredondadas no sentido longitudinal.



Bordas laterais estabilizadoras para facilitar a mudança de posição "deitado-sentado" e as rodas"

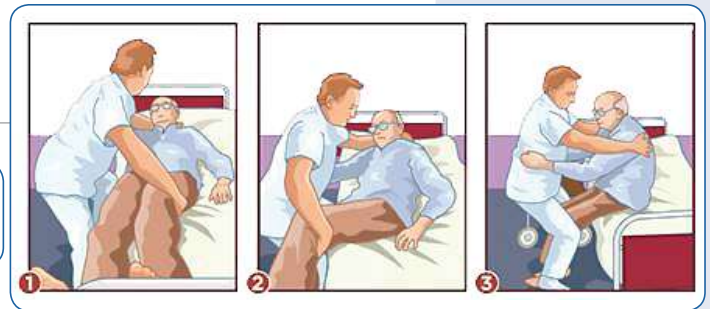

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO DEL PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDAD
<b>EPSUS Monobloco, Capa para colchão Dermalon FR*</b>	VE208MB	198 x 88 x 17 cm	de 30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 classe D	Espuma de alta resiliência $\geq 34\text{ kg/m}^3$
<b>EPSUS Monobloco, envoltório integral Promust PU HD*</b>	VE208MB/HIPH				

Manutenção: Promust PU (HD)



Manutenção: Dermalon FR



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.