


KAPPA madras

Tryksårsforebyggende skummadras
op til sårstadiet 2

Primær anvendelse

Kommuner
Institutioner
Hospitaler

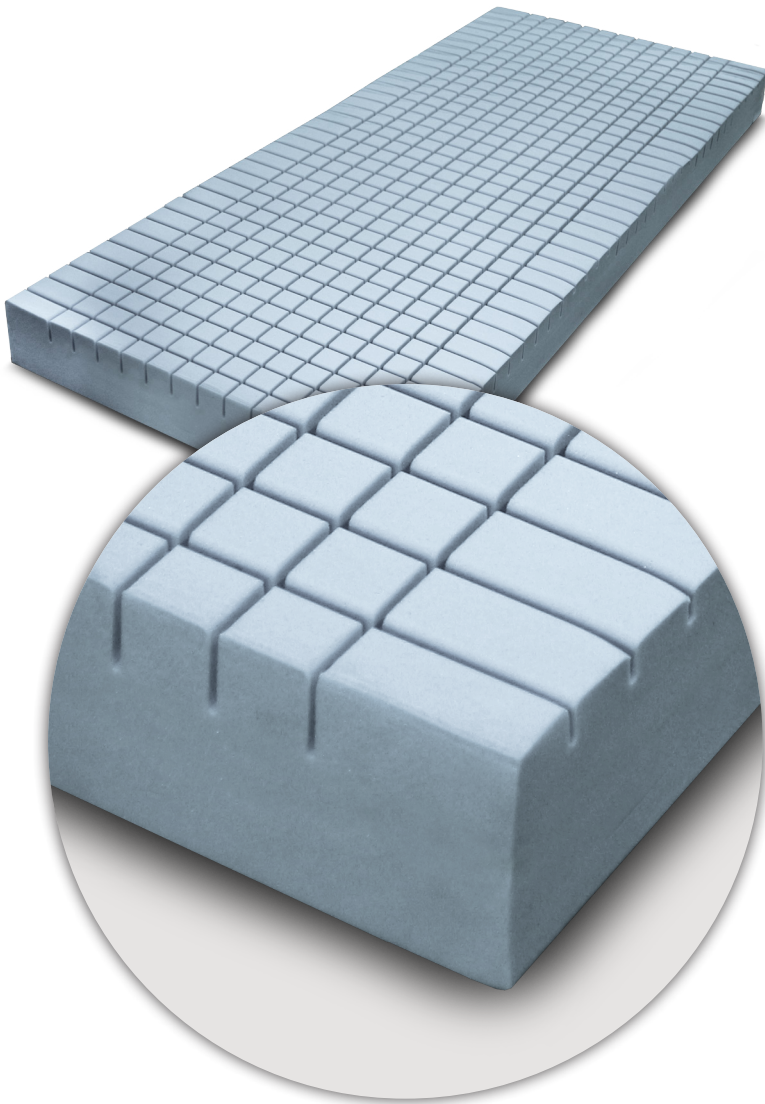

Kappa skummadras fra Ergolet er primært for anvendelse til brugere med risiko for tryksår op til stadium 2.

Man skal vælge en Kappa skummadras fordi:

- Den sikrer optimal liggekomfort for brugeren
- Velegnet til brugere med risiko for udvikling af tryksår
- Beregnet til senge med indstillelig sengebund
- Madrassen leveres med åndbart inkontinensbetræk
- Betrækkets materiale er allergivenligt og brandhæmmende
- Forlængerstykker kan tilkøbes i forskellige størrelser

Skum med skæringer

Kappa skummadras materiale er koldskum med en rumvægt på 50 kg/m³, som sikrer en høj levetid på madrassen. Skummadrassen har skæringer, som er zoneinddelte i forskellige dybder, der er med til at optimere liggekomforten. Dybden i skæringerne tager højde for, hvor trykbelastningen er størst. Hvilket i praksis betyder, at hvor trykbelastningen er størst – er skæringerne dybere, og dermed ydes der en øget trykudligning på disse punkter.

Samtidig er skæringerne med til at skabe en blødere overflade på skummet og dermed en øget liggekomfort.

Åndbart betræk

Kappa skummadras har åndbart inkontinensbetræk, som er allergivenligt og brandhæmmende. Betrækket er fremstillet af 100% polyester, som er svejst og ikke syet sammen. Betrækkets materiale, samtidig med at betrækket er svejst sammen, gør, at der er ikke kan trænge væsker som f.eks. urin, blod og lignende igennem.


Betrækket er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, og betrækket er lavet i strækbart materiale, som sikrer optimal udnyttelse af trykaflastningen.

Betrækket er nemt at montere på Kappa skummadras, idet den er forsynet med en tricot, som samtidig beskytter skummet, og medvirker til at Kappa skummadras får en længere levetid.

Tilbehør

Til Kappa skummadras kan der købes forlængerstykker i målene 10 cm, 15 cm eller 20 cm. Forlængerstykket skal altid placeres i hovedenden.



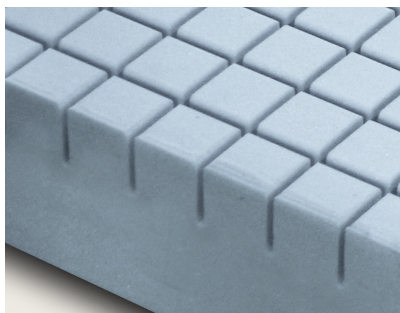

Madrassens skæringer, det elastiske materiale samt høje bæreevne sikrer en god liggekomfort.



Inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f. eks. urin og blod ikke trænger igennem. Der er 4 håndtag - 2 på hver side. Betrækket er svejst ved lynlåsene. Det er vaskbart ved 90 grader og kan autoklaveres.



Rengøringsmetode:

Som udgangspunkt kræver madrassen ikke rengøring, idet den er monteret med et åndbart betræk med væskebarriere. Skulle der være behov for, at madrassen skal rengøres kan madrassen rengøres med alm. vand og sæbe.

Den kan tåle desinficering med Ethanol 70 %. Man skal dog være opmærksom på at den skal tørres efter med vand.

Madrassen må ikke gennemvædes, idet det øger risikoen for at beskadige skummet. Når madrassen er fugtig, må den ikke udsættes for tryk (fra f.eks. betræk) eller andre belastninger under rens/vask/tørring, idet dette kan medvirke til at beskadige skummet og deformere madrassen.

Øvrige rengøringsmidler med alkohol og blegemidler kan være skadelig for madras og betræk.

Version	Mål	HMI-nr	Varenummer
Kappa skummadras	83 cm x 200 cm x 14 cm	79893	023-00002
Kappa skummadras	88 cm x 200 cm x 14 cm	79894	023-00003
Tilbehør	Mål	Varenummer	
Madrasforlænger	83 cm x 10 cm x 14 cm	023-00012	
Madrasforlænger	88 cm x 10 cm x 14 cm	023-00014	
Madrasforlænger	83 cm x 15 cm x 14 cm	023-00006	
Madrasforlænger	88 cm x 15 cm x 14 cm	023-00007	
Madrasforlænger	83 cm x 20 cm x 14 cm	023-00013	
Madrasforlænger	88 cm x 20 cm x 14 cm	023-00015	
Dahlia betræk til madras	83 cm x 200 cm x 14 cm	023-00008	
Dahlia betræk til madras	88 cm x 200 cm x 14 cm	023-00009	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Min. brugervægt	30 kg
Max brugervægt	140 kg
Bredde Kappa 83 cm	830 mm
Bredde Kappa 88 cm	880 mm
Længde	2000 mm
Højde	140 mm
Vægt Kappa 83 cm	14,3 kg
Vægt Kappa 88 cm	14,8 kg
Rumvægt	50 kg/m ³ , indtrykshårdhed 145 Newton
Forventet levetid	5 år

Udformningen fra enden



Udformningen fra siden



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende, og kan ændre sig i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.

