

# POSTURA

## DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA



## A LA POSTURA CON MICROBOLAS

**C.I.D.**  
Total Protection Ag+  
Control de Infecciones Cruzadas

LOS COJINES DE POSICIONAMIENTO **ASKLÉ SANTÉ** PERMITEN COLOCAR AL PACIENTE EN DIFERENTES POSTURAS DE MANERA SIMPLE Y RÁPIDA, CONTRIBUYENDO ASÍ A REDUCIR LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LA PIEL Y LOS TEJIDOS EN LAS ZONAS ANATÓMICAS CON RIESGO DE ESCARA



- Las protecciones de la funda permiten evitar la penetración de los líquidos.
- Protección Ag+ por Sanitized® Silver ofrece una resistencia más fuerte al desarrollo de las bacterias.
- Recubrimiento del Policarbonato sobre la malla Poliamida para una duración alta.
- Certificado Oeko-Tex clase 2 para un contacto directo con la piel.
- Microbolas en PES autoextinguible para mayor seguridad durante su uso en cama.
- Concepto del Vacuum Touch™ para un reparto estable de las microbolas.

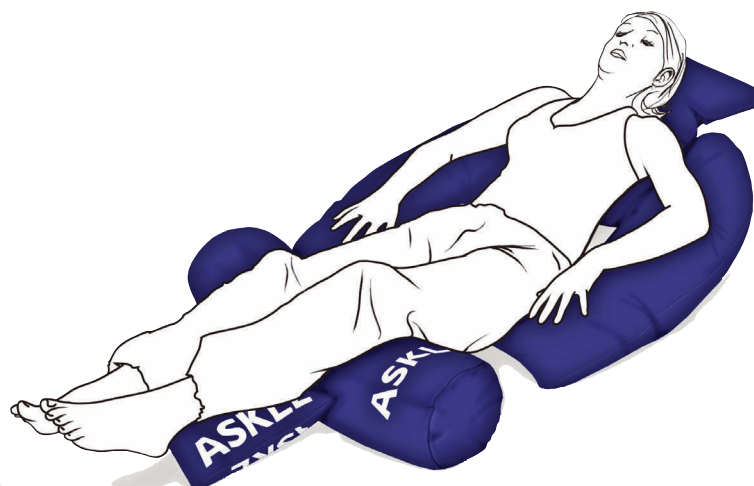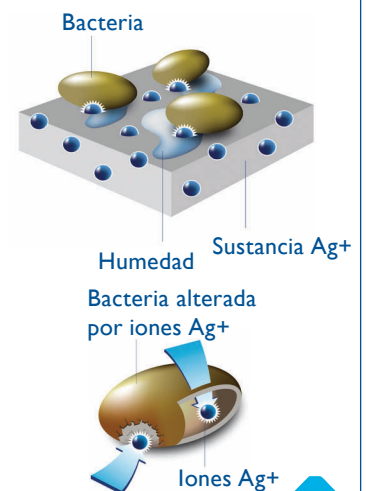

### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL TROCANTER

Escaras poco frecuentes pero peligrosas que aparecen principalmente en los pacientes encamados en decúbito lateral estricto.

Los expertos recomiendan la posición en decúbito semilateral a 30°.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de posicionamiento lateral 30°**

- + 2 tallas para una adaptación óptima a la morfología de los pacientes.

- + Una almohadilla integrada para el confort del usuario.

- + Instalación fácil, sin esfuerzo y rápida del paciente.

- + Mantenimiento estable y duradero.



### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DE LOS CODOS Y LOS TALONES

Escaras de rara aparición en los codos pero frecuentes en los talones, principalmente en los pacientes encamados.

Los expertos recomiendan la puesta en descarga total de los codos y los talones en decúbito dorsal.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: soportes de posicionamiento a nivel de la pierna y del antebrazo.**

- + La inclinación regular es favorable a la circulación sanguínea.

- + El borde regular del dispositivo no es traumático.

- + Ausencia de sobrepresión a nivel del tendón de Aquiles y de los maléolos.

- + Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.



### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DE LOS MALÉOLOS Y LAS RODILLAS

Escaras de frecuencia elevada en los pacientes con retracciones musculotendinosas de los miembros inferiores.

Los expertos recomiendan la abducción de los miembros inferiores para descargar los maléolos, cóndilos y rodillas. Descargar las zonas a nivel del sacro, de los isquiones y de los talones.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín cilíndrico asociado al soporte de abducción de las rodillas.**

- + Mantenimiento de los miembros inferiores en abducción.

- + Reducción del apoyo ejercido a nivel de los cóndilos femorales y de los maléolos internos.

- + Protección de los puntos de contacto de las rodillas.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

## PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL SACRO, DE LOS ISQUIONES Y DE LOS TALONES

Escaras sacras que aparecen en los pacientes en posición postrada hacia delante o en pacientes encamados en posición semisentada inadecuada. Escaras isquiáticas frecuentes en pacientes sentados. Es la escara más frecuente en las personas parapléjicas. Los expertos recomiendan una posición llamada de tipo "Semi Fowler" para descargar las zonas sacras, isquiáticas y taloneras.

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: la asociación de 4 cojines adaptados.

- + Reducción del deslizamiento hacia delante responsable del cizallamiento de los tejidos.
- + Limita el riesgo de caída.
- + Alternativa al empleo de camas no hospitalarias.
- + Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.

## UNA AYUDA A LA PREVENCIÓN DE POSICIONES VICIADAS DE CADERAS Y RODILLAS

LA FLEXIÓN DE RODILLAS ÚNICAMENTE

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín cilíndrico colocado debajo de las rodillas.

- + Reduce el hueco de la zona lumbar.
- + Alivia los dolores de origen facetario.

EL MANTENIMIENTO ESTABLE DE LAS CADERAS EN POSICIÓN DE ABDUCCIÓN

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de abducción de cadera.

- + Está indicado en fase postoperatoria de prótesis de cadera.
- + Limita el riesgo de luxación de una Prótesis Total de cadera al dar la vuelta a los pacientes.

## FUNDA PROTECTORA LAVABLE PARA COJÍN DE POSICIONAMIENTO

- Una funda para cada cojín de la gama (referencias al dorso).
  - Solapa\* de protección del cierre para permitir evitar las infiltraciones.
  - Etiqueta de trazabilidad con condiciones de mantenimiento y composición en el interior de las fundas.
- \* (excepto para ref. VHOCP05 y VHOCP06)

## UNA RESPUESTA ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

### • Los cojines universales T1 y T2

- + Se adaptan a todas las situaciones de tratamiento (utilizados solos o en asociación).
- + Sustituyen el uso derivado de las almohadillas respetando la prevención del riesgo antihigiénico.
- + Facilitan la instalación o darles la vuelta a los pacientes durante los actos de cuidado.
- + Tienen unas dimensiones reducidas para guardarlos con facilidad.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)
	<b>Cojín flotador modular con forma circular</b>	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	<b>Cojín 1/2 flotador Soporte de abducción de las rodillas</b>	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	<b>Cojín Universal 1</b>	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	<b>Cojín Universal 2</b>	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	<b>Cojín Cilíndrico</b>	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60
	<b>Cojín Soportede Posicionamiento Pie</b>	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	<b>Cojín Soportede Posicionamiento Mano</b>	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	<b>Cojín de abducción de las Caderas</b>	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	<b>Cojín de Posicionamiento Lateral 30°</b>	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCPI1CIC	2,00	170 x 74
	<b>Cojín de Posicionamiento medialuna</b>	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	<b>Bolsa de Transporte</b>	VCPI0	0,65	80 x 90

### MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN: FUNDA CIC

2 años de garantía

• **100% PromustCIC: 58% poliéster- 35% polyethanopolycarbonat 8% otros**



### PRECAUCIONES RESPECTO A LAS PROTECCIONES

- No hay riesgo en contacto directo con la piel herida del paciente (Oeko-Tex clase2).
- No utilizar en contacto directo con la funda de protección productos abrasivos, decapantes o disolventes y objetos punzantes.
- Controlar visualmente una o varias veces al año el buen estado de los cojines. En caso de una modificación del aspecto visual o alteración de las costuras soldadas, el producto será retirado y eliminado.

### NORMAS

- Conforme con la norma europea relativa al fuego EN 597-1 y 2 y a la recomendación GPED D Ibis 89 y D90.
- Protección Crib V según el BS7275 1989.
- Conforme con la norma NF EN ISO 22610 2006 de resistencia a la penetración de la barrera bacteriana en el estado húmedo.
- Conforme con la norma 16603 2004 ISO de resistencia de los materiales a la penetración por la sangre y los fluidos corporales.
- Conforme con la norma 16604 2004 ISO de resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidroestática.
- Resistencia a la bacteria MRSA (ATCC6538)

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.