

## Los **plus** del colchón

### TRATAMIENTO TERAPÉUTICO

- ▶ 1 modo terapéutico: alternancia de las presiones de 1 cada 2 celdas.

### SIMPLICIDAD EN EL USO

- ▶ Cálculo automático y continuo de la presión de inflado.
- ▶ Display intuitivo en el compresor.
- ▶ Ayuda al diagnóstico técnico a través del código QR.
- ▶ Guía de uso simplificada.

### CONFORT PARA EL PACIENTE

- ▶ Regulación del nivel de presión para una mayor comodidad.

### SEGURIDAD DE USO

- ▶ Gestión de la posición sentado (> 30°)
- ▶ Alarmas visuales y sonoras

### ECOLOGÍA

- ▶ Desarrollo con eco-concepto respetuoso con el medio ambiente.
- ▶ Diseñado y fabricado en Europa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMATIVA AL FUEGO
<b>axtair one® plus</b> (Compresor + colchón) Funda <b>Promust PU</b> para una cama de 90 cm de ancho	VAXT2/ONE-P	195 x 87x17 cm	30 a 150 Kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 Clase D
<b>axtair one® plus</b> (Compresor + colchón) Funda <b>Promust CIC</b> para una cama de 90 cm de ancho	VAXT2/ONE/CIC-P			

Mantenimiento de las fundas PROMUST PU y PROMUST CIC



Garantía de 2 años



NOVEDAD

**axtair one® plus**

MEJORANDO EL TRATAMIENTO  
DE LAS ÚLCERAS EN PRIMEROS ESTADIOS



**WINCARE**  
S p a i n

info@winnicare.es  
www.winnicare.es

Ayuda a la prevención de úlceras en pacientes con riesgo de **medio a elevado**

Ayuda al tratamiento de úlceras de **estadios 1 y 2**

PARA PACIENTES DE HASTA **150 KG**

**WINCARE**  
S p a i n

**WINCARE**  
S p a i n

# axlair one® plus



## COMPRESOR


- ▶ Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.
- ▶ 1 modo terapéutico: alternancia de presiones.
- ▶ Gestión de la posición sentado (> 30°).
- ▶ Ajuste del confort: regulación del nivel de presión.
- ▶ Alarmas visuales y sonoras.
- ▶ Número de serie en la parte posterior del compresor, información simplificada, y código QR en el lateral.

## CÓDIGO QR para un acceso simple y rápido a la información del producto

- ▶ Referencia y número de serie del producto.
- ▶ Ficha de producto, guía de uso, video de producto, FAQ, autotest.



## VÁLVULA CPR (CARDIO PULMONARY RESCUE)

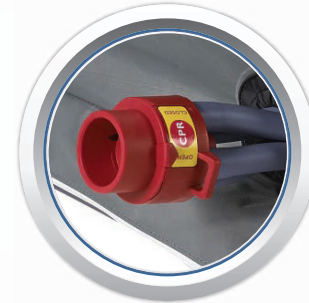

- ▶ Apertura y cierre sencillo y rápido.
  - ▶ Desinflado del colchón en menos de 20 segundos en caso de urgencia\*
- \*Pacientes de 80 kg tumbados

## FUNDA



- ▶ Lado superior: bi-elástica, impermeable a líquidos y transpirable al vapor de agua.
- ▶ Lado inferior: base antideslizante.
- ▶ 2 fundas disponibles:
  - PROMUST PU
  - PROMUST CIC
  - ↳ con tratamiento antibacteriano con iones de plata.

CE



## CELDAS



- ▶ 18 celdas de poliuretano éter de 12cm de altura de aire terapéutico y 300µm de espesor.



## TAPÓN DE TRANSPORTE

- ▶ Permite el sellado de las 2 vías para conseguir una autonomía de 8 horas.



Bombas de inflado y desinflado rápido para una fácil preparación y recogida del colchón



Entregado dentro de una bolsa de transporte