

# BETT X'PRESS

## 2. Generation

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNG DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42EWG: ES WURDE ÜBEREINSTIMMEND MIT DEN GELTENDEN NORMEN, INSBESONDERE MIT IEC 60601-2-52, AUSGELEGT UND HERGESTELLT.

• **Ergonomie:** Die ergonomische Bettmechanik ermöglicht dem Aufsteller bei Lieferung, Montage und Demontage des Bettes die zur Vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparats empfohlene Haltung einnehmen zu können. Der geringer Platzbedarf, sowie die Lagerung auf den eigenen Rollen macht einen Transport unter allen Bedingungen möglich (Fahrstuhl, kleine Fahrzeuge...). Für dieses selbsttragende Bett ist kein Wagen erforderlich.

• **Einfach:** Benutzerfreundlichen Montage- und Demontage-Arbeiten: Es ist kein Werkzeug nötig. Blaue Teile sind mit Funktionen verknüpft. Ihre Rolle besteht in der Benutzerführung beim Zusammenbau des Betts.

• **Sicher:** Das neue Befestigungssystem für Kopf- und Fußteil „Easy Move“ verhindert den Verlust von Sterngriffschrauben und sichert die Befestigung von Kopf- und Fußteil am Bett. Die Kabelführung vermindert Zugbeanspruchung und die Gefahr von Beschädigungen.



## Selbsttragendes Bett X'PRESS der 2. Generation



Verwandlung des selbsttragenden Wagens in den Rahmen.




Verriegelungen der fußseitigen Rosthälfte in waagerechter Stellung.



Verbindung der beiden Rosthälften mit durchgehenden Sterngriffschrauben.

### EASY MOVE

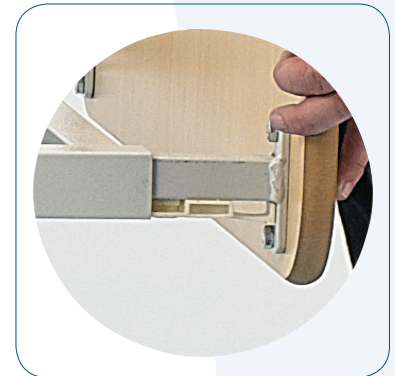

Befestigung von Kopf- und Fußteil mit dem System EASY MOVE: einfach, schnell und sicher.

### TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	VERSTELLBARE HÖHE	VERSTELLBARES RUMPFTeil	VERSTELLBARES BEINTEIL	NORMALE BETRIEBSLAST	ROLLEN	NORMEN	ABDICHTUNG
<b>X'PRESS 2. Generation</b> 2 Funktionen	montiertes Bett: 90 x 200 cm teilbarer Rost	34 bis 84 cm	0° bis 75°	12° Zahnstangen	170 kg Matratze 20 kg Patient 135 kg Zubehör 15 kg	Ø100 mm mit Bremse ohne Faden- schutz	IEC 60601-2-52	Motonisierung und Gehäuse LINAK IP66  Verriegelbare Fernbedienung LINAK IP54
<b>X'PRESS 2. Generation</b> 3 Funktionen ohne Knieknick	Bett in Lagerstellung: 50 cm breit 90 cm lang 160 cm hoch			13,5° elektrisch				
<b>X'PRESS 2. Generation</b> 3 Funktionen mit Knieknick				Knieknick 26° und 16° Fußverstellung über Zahnstange				

- 2 Zubehörhalterungen (an den Längsseiten).
- 2 Halterungen für Infusionsständer (am Kopf des Bettes).
- 2 Halterungen für Aufrichthilfen (am Kopf des Bettes).

Garantie auf Rahmen, Zylinder und Fernbedienung von 5 Jahren\*.

Garantie auf Kopf-/Fußteil und Zubehör von 1 Jahr\*.

\*Unter normalen Einsatzbedingungen und ohne Verschleißteile – siehe Anweisungen im Bedienungshandbuch.

