


ŁÓŻKO X'PRESS®



Łóżko na zdjęciu wyposażone w panele Madelia w kolorze jasny buk, poręcze i stelaż malowane proszkowo.

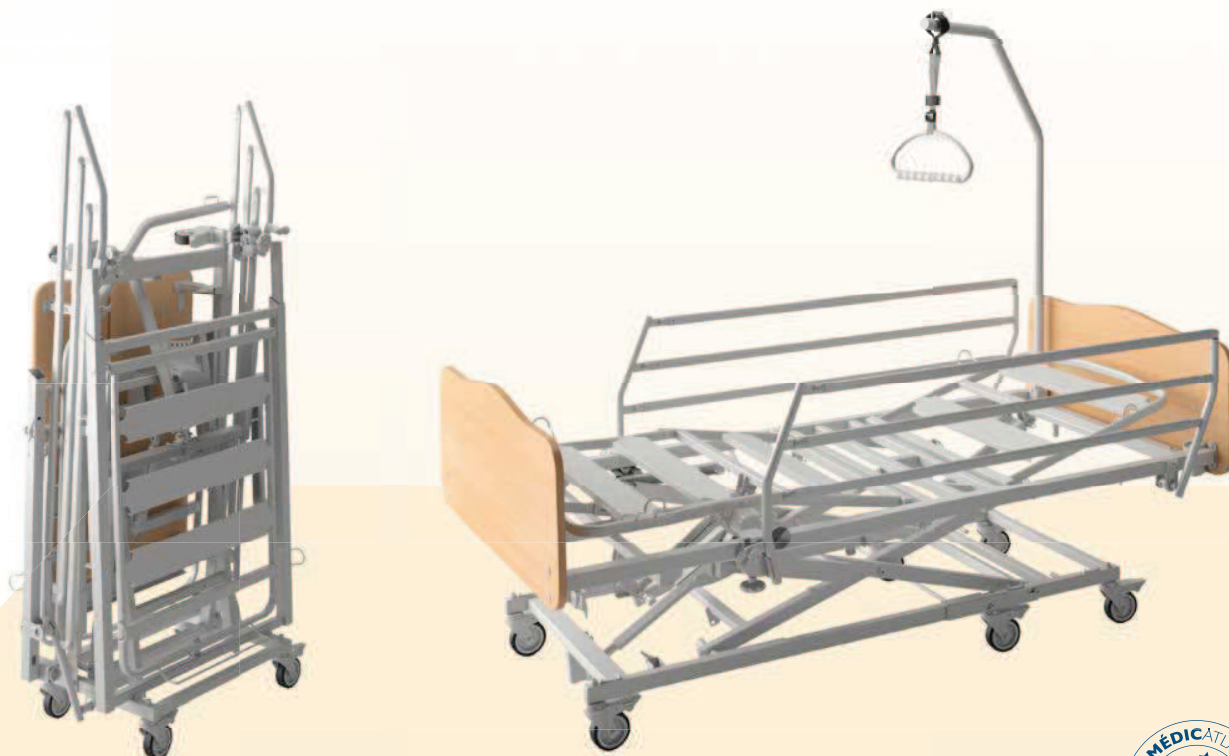

ERGONOMIA

- ▶ Ergonomia mechaniczna łóżka umożliwia instalatorowi zachowanie pozycji zalecanych w profilaktyce dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego w czasie operacji dostawy, montażu i demontażu łóżka.
- ▶ Jego ograniczony rozmiar oraz sposób przechowywania na własnych kółkach ułatwiają transport w każdej sytuacji (windy, małe pojazdy...).
- ▶ To łóżko na kółkach nie wymaga do transportu wózka.

PROSTOTA

- ▶ Bardzo intuicyjny montaż i demontaż. Wszelkie narzędzia są zbędne.
- ▶ Części w kolorze niebieskim odpowiadają funkcjom. Ich rolą jest podpowiedzenie kolejnych czynności przy składaniu łóżka.

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Nowy system mocowania paneli „Easy move” pozwala uniknąć zgubienia podkładek i wzmacnia zamocowanie paneli szczytowych łóżka.
- ▶ Sposób poprowadzenia przewodów ogranicza ich narażenie na naciągnięcie i uszkodzenie.

Sprzedaż w Polsce:



Ergolet Polska Sp. z o.o.
tel. 68 371 10 45
e-mail: sales@ergolet.pl
www.ergolet.com



PRZEKSZTAŁCENIE
wózka w ramę łóżka.



PRZYKRĘCENIE dolnej części
stelaża łóżka w pozycji poziomej.



POŁĄCZENIE dwóch części
stelaża łóżka wzmocnione za
pomocą wkręcanego bolca.



Mocowanie paneli
systemem
„EASY MOVE”
proste, szybkie
i bezpieczne.



Zestaw do transportu
w pozycji poziomej
X'press II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA	WYMIARY	REGULOWANA WYSOKOŚĆ	PODPARCE PLECÓW	UNIESIENIE NÓG	OPCJE	OBciążENIE MAKSYPALNE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ	
X'PRESS 2 funkcje	Łóżko złożone 90 x 200cm, stelaż łóżka składany Łóżko złożone 50cm szerokości, 90cm długości, 60cm wysokości	34 do 84cm Odległość od podłogi 13cm	0-75°	12 zębátka	Regulacja pozycji pleców z zębátką	Ciężar nominalny 170kg Materac 20kg Pacjent 135kg akcesoria 15kg	Ø 100mm	CEI 60601-2-52 do użytku w środowisku 3,4 i 5	Słownik i sterownik LINAKIP66 Pilot z blokadą LINAK IP 54	
X'PRESS 3 funkcje bez regulacji ułożenia ud i podudzi										13,5° Elektryczne
X'PRESS 3 funkcje z regulacją ułożenia ud i podudzi										Zgięcie kolan 26° 16° regulacja ustawienia nóg przez zębátkę

⁴¹⁾Gwarancja 3 lata

- 2 uchwyty na akcesoria (na bocznych barierach).
- 2 statywy na kroplówkę (przy zagłówniku).
- występnik (przy zagłówniku).

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*.
Gwarancja na panele i akcesoria 1 rok*.

*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu - patrzeć na instrukcje użytkownika.

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

Fotografie nie mają wartości oferty handlowej.

MÉDICATLANTIC Groupe Winnocare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francja
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com
www.winnocare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNOCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE. Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach.

MÉDICATLANTIC
by WINNOCARE