

# BETT XXL X'PRESS



DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANSPRÜCHEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EU. ES WURDE GEMÄSS DEN GELTENDEN NORMEN ENTWICKELT UND HERGESTELLT CEI60601-2-52.



Das erste breite selbsttragende Bett ohne Transportset



• Verfügbar in **120 und 140 cm**



• **Schneller Aufbau:** ohne Werkzeug in nur wenigen Minuten



• **Sehr handlich:** das zusammengeklappte Bett kann auf seinen eigenen Rädern mit einem Durchmesser von 100 mm bewegt werden, die Überwindung von Hindernissen wird wesentlich vereinfacht.




In weniger Minuten läßt sich das Bett X'PRESS XXL ohne Werkzeug vertikal aufstellen

Ideal für den Hausgebrauch



Das Bett XXL X'PRESS ist in 2 Versionen erhältlich: 2 und 3 elektrische Funktionen mit oder ohne Abwinkeln.

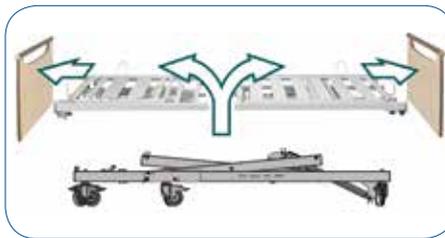

Kopf- und Fußteil, Oberkörperaufrichter und zum Schluß Beinaufrichter abnehmen.




Die Klappvorrichtung leicht anheben, um das Bettgestell aufzurichten.

### DAS BETT XXL X'PRESS : KONFIGURIERBAR UND ERWEITERBAR (mögliche Optionen)



Elektrische Oberkörperaufrichtung.

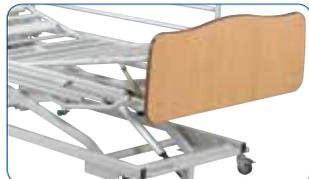

Manuelle Beinaufrichtung mit Zahnstange.



Räder Ø 100 mm.

Unabhängige Bremse auf jedem Rad des Bettes



Breite verschweißte Metalllatten. Sie sind für eine leichte Reinigung ausgelegt.



Verlängerung des Bettrahmens um 20 cm.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	OBERKÖRPERAUFRICHTER	BEINAUFRICHTUNG	NORMALE BELASTUNG	RÄDER	NORMEN	DICHTIGKEIT
<b>XXL X'PRESS</b> 2 elektrische Funktionen	120 x 200 cm	70°	12° Zahnstangen	315 kg Matratzen 30 kg Patient 270 kg Zubehör 15 kg	Ø 100 mm mit Bremsen ohne Fadenschutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, Gehäuse, Fernbedienung LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm						
<b>XXL X'PRESS</b> 3 elektrische Funktionen	120 x 200 cm		Beugung der Knie 26° (Oberschenkel) und Einstellung der Füße 16° per				
	140 x 200 cm						
Zubehör	Epoxid- Winkelaufrichter (siehe Zubehörblatt)						
	Zusammenklappbare Gitter VISION Epoxyd (siehe Zubehörblatt)						
	Abélia Kopf- und Fußteil 120 oder 140 cm (siehe Kopf- und Fußteilblätter und Farbkarten)						

- 2 Zubehörträger (auf den langen Bahnen).
- 2 Infusionsständervorrichtungen.
- 2 Aufrichtervorrichtungen (am Kopf des Bettes).

5 Jahre\* Garantie auf Mechanik, Elektrik und Fernbedienung.  
1 Jahr\* Garantie auf Kopf- und Fußteil und Zubehör. \*Unter normalen Nutzungsbedingungen, verschleißteile ausgenommen - siehe Nutzungsanweisung.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält MÉDICATLANTIC sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.