

WIN CARE

axtair automorpho[®] plus

La famille axtair
automorpho[®] plus
s'agrandit !



1 compresseur, 2 matelas

La nouvelle polyvalence Axtair

alliant **efficacité**, **confort** & **simplicité**



axtair

Et si vous n'aviez plus à faire de compromis entre **Efficacité, Confort & Simplicité** ?



Efficacité


Pour répondre à tous les profils patients. Stades & localisations des escarres, poids & positions.

Confort

Afin de soulager les douleurs pouvant être liées à l'escarre, chez des patients alités plus de 15h par jour.

Simplicité

Afin de minimiser la charge mentale des soignants et leur permettre de se concentrer sur les soins des résidents.

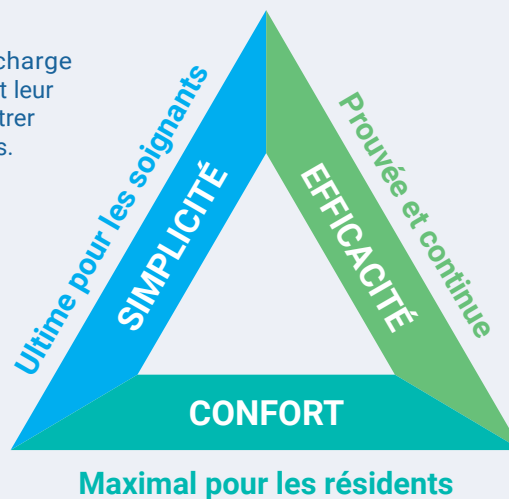

axtair automorpho[®] plus

Mode confort

Afin d'ajuster la pression du matelas et apporter un meilleur ressenti au patient

Compresseur tout automatique

Breveté, le compresseur ajuste en continu le cycle au patient (poids, morphologie) pour une efficacité maximale. 3 modes automatiques

Zéro réglage à l'installation

Pas de bouton On/Off, branchez le matelas, le soin commence !

Confort auditif et visuel

- Un compresseur silencieux : < 35 bBA pour une haute qualité de repos
- Une intensité lumineuse qui se réduit automatiquement dès 5 minutes de non utilisation

QR Code «Scan me»

Pour un accès simple et rapide aux informations produit



Décharge talonnière

Permet de soulager les pressions dans cette zone sensible en déchargeant la cellule sous les talons



Cellules

18 cellules en Polyuréthane.
Ensemble faisceaux-cellules amovible : facilite le nettoyage et la désinfection du matelas

- Qualité
- Solidité
- Silencieuses

Housse sérigraphiée

- Bi élastique et imperméable au liquide, perméable à la vapeur d'eau, ignifugée
- Rabat long pour une meilleure hygiène

Base antidérapante

Permet d'éviter les sangles pouvant endommager les lits

Vanne CPR

CPR : Cardio Pulmonary Rescue
Facilement accessible et permettant un dégonflage rapide

Passe-câble

Pour créer un environnement de soin plus sûr et éviter les incidents

93,1%

Des patients sont (très) satisfaits quant au **caractère silencieux** du compresseur¹.

88%

Des patients sont (très) satisfaits **quant au confort du matelas Axtair**, ce qui a amélioré significativement l'**observance** du patient au traitement¹.

0%

Incidence¹
Stade 2 ou plus

Étude Clinique

Une efficacité prouvée !

Prouvée dans l'**étude Clinique (ACTIVE)**, ayant permis le remboursement en nom de marque Axtair Automorpho® Plus.

Pas de nouvelles escarres

De stade 2 ou plus

Depuis 2002,
+ de 2 millions
de patients utilisent des matelas Axtair.
Ce sont des millions d'escarres évitées & traitées !

La famille **axtair** **automorpho[®] plus** s'agrandit !

L'Automorpho[®] Plus, désormais
disponible dans une version tout air

Un matelas tout air

Nettoyage simplifié,
entièrement compatible
avec les machines barrières
et Reha Wash

**Immersion
profonde du patient,**
12 cm d'air thérapeutique
sur 8 cm de base air

**Une base d'air
unique et flexible,
en polyuréthane
de haute qualité,**
alliant souplesse,
durabilité et confort



Nouveautés
produit

Hygiène facilitée & sécurité renforcée



Passe-câble de série

Totalement intégré et ergonomique, pour une installation très sécurisée et un nettoyage facilité.



Manchon

intégralement soudé, minimise les risques de pénétration de fluides et facilite la décontamination.



Logistique optimisée

Matelas 3 fois plus compact
transport et stockage facilités.



Maintenance simple et économique

Base air composée de 3 modules indépendants pour un entretien optimisé.



1 compresseur, 2 matelas :
**La nouvelle polyvalence
Axtair Automorpho® Plus**


Expert & leader

de la prévention des escarres
depuis plus de 40 ans

Découvrez notre offre complète de matelas statiques


Matelas Classe II

Une gamme large et compétitive qui répond aux besoins des patients et des soignants.

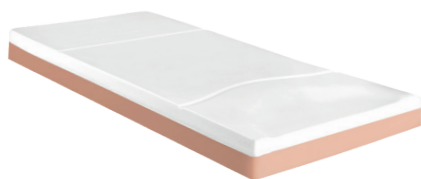


VMA63

Technicité & Ergonomie

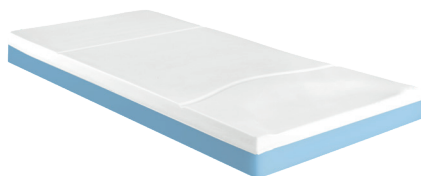

VMA 64

Innovation & Polyvalence

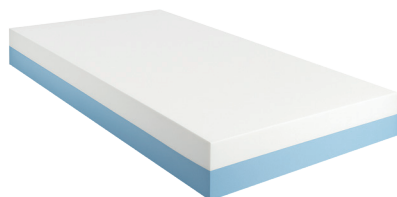


NOVA FORM

Praticité & Durabilité




Matelas Multistrates

Une offre unique et différenciante spécialement conçue pour la collectivité, des produits à la fois confortables et durables.

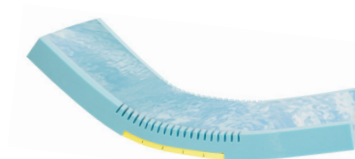

UNIMAT

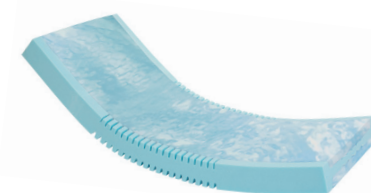

ROTAMAT

Housses pour matelas statiques

Découvrez également
notre large offre
de housses.

Le bon choix de housse peut
faire toute la différence pour
le patient et le soignant



PROMUST PU



PROMUST PU HD



PROMUST CIC

Parce que la prévention et l'aide au traitement des escarres ne doit pas s'arrêter au matelas

Découvrez nos autres solutions pour assurer une continuité des soins

Coussin à air statique

Kineris

Destiné aux patients à risque très élevé d'escarre

Les bénéfices clés

- **Haute protection** : immersion profonde dans les cellules pneumatiques pour une répartition uniforme des pressions.
- **Stabilité & Confort** : s'adapte à toutes les morphologies et corrige les déséquilibres posturaux.
- **Microclimat préservé** : circulation d'air entre les cellules pour limiter la macération, complétée par une housse intégrale respirante et extensible.



Caractéristiques techniques :

- Matériau : cellules individuellement déformables en néoprène (haute durabilité).
- Adaptabilité : hauteur de 7 cm ou 10 cm selon les besoins cliniques.
- Capacité : supporte jusqu'à 150 kg.
- Disponible en mono ou bi-compartiments, et différentes tailles.

Coussins de positionnement

POZ 'IN' FORM PLUS & CAREWAVE PLUS

Découvrez notre gamme de coussins de positionnement, unique et innovante

Pour assurer un maintien postural, corriger des postures, améliorer le confort ou faciliter les soins.

- **2 types de technologies** à choisir selon le profil patient : **micro-billes ou micro-fibres**
- **17 formes** pensées pour couvrir tous les besoins
- **3 textiles** pour répondre aux différents environnements de soin
- Des **numéros associés** à chaque forme
- Un **QR code** sur chaque housse pour un **accès rapide aux informations clés**
- **Une gamme intuitive** avec des **outils simples** pour que le positionnement devienne accessible à tous



Accédez à tous nos outils en un scan !

Découvrez la gamme axtair



One® plus



Automorpho® plus

	Base mousse	Base mousse	Base air
Composition de la base	Mousse 5 cm	Mousse 5 cm	Air statique 8 cm
Hauteur d'air thérapeutique	12 cm	12 cm	12 cm
Poids utilisateur maximum	165 kg	180 kg	180 kg
Produit inscrit à la LPP	1293872	1282740	-
Compresseur tout automatique qui ajuste la pression en continu	✓	✓	✓
Ajustement du confort	✓	✓	✓
Gestion de la position assise	✓	✓	✓
Décharges talonnières	-	✓	✓
Fonction verrouillage clavier	✓	✓	✓
Modes de fonctionnement	Dynamique	Dynamique, statique basse pression et soin	
Passer câble	Passants à boutons pression	Passants à boutons pression	Totalement intégré
Housse du manchon	Zip/coutures	Zip/coutures	Entièrement soudé
Compatible avec Reha Wash et machine barrière	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
Maintenance autonome et tracée via Aircare	✓	✓	✓
Largeurs disponibles	90 cm	90/100/120 cm	90 cm
Types de housses PROMUST disponibles	PU / CIC	PU HD / CIC soudé	

1. Selon protocole défini



AIRCARE, une solution de maintenance unique !

Pour garantir la traçabilité, la bonne exécution de la maintenance de vos compresseurs AXTAIR et ainsi maximiser leur durée de vie.



SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ

- Permet un diagnostic rapide de l'état du compresseur.
- Kit de maintenance prêt à l'emploi avec un certificat de traçabilité.
- Accès aux vues éclatées des pièces détachées et tutoriels vidéo.



MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

- Possibilité d'identifier et planifier les dispositifs nécessitant une maintenance.
- Rapports PDF détaillés disponibles pour documenter les actions effectuées.



OPTIMISATION DES COÛTS DE MAINTENANCE

- Minimise les temps d'intervention pour maximiser la disponibilité du parc.
- Formation certifiée Qualiopi des techniciens au bon usage et aux bonnes pratiques.



Une gamme de matelas engagée !

Choisir la gamme Axtair, c'est travailler avec une entreprise Française, engagée pour avoir un impact sociétal et environnemental positif.



UN DISPOSITIF ÉCO-CONÇU EN FRANCE

Amélioration de l'impact de 11% vs. la génération précédente. Pensé pour minimiser son impact carbone sur l'intégralité du cycle de vie. (Fournisseurs locaux privilégiés, 33% de plastique en moins et 3 fois moins de vis).



CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE

Compresseur conçu pour minimiser sa consommation électrique. (Équivalente à une ampoule de réfrigérateurur : 35,04 kW/an).



CHOIX DE MATÉRIAUX FIAIBLES ET ROBUSTES

Compresseur, matelas et housse conçus spécialement pour augmenter la durabilité du produit.

L'entretien et les maintenances sont simples (un seul outil nécessaire, pièces détachées disponibles pour être changées de manière autonome).

Cela contribuant à une réduction du coût de possession sur le long terme.