

Axtair Automorpho® Plus



Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 180 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



Site Nîmes (30)

Forfait location hebdomadaire
10,88 € TTC - CODE 1282740 *

➤ **3 LARGEURS DE MATELAS DISPONIBLES**
90, 100 & 120 cm

➤ **2 TYPES DE BASES DISPONIBLES**
mousse ou air



2 ANS GARANTIE

A commander sur le site (30) Nîmes

automatic technology
BREVET

COMPATIBLE PROGRAMME
Ai Care

Score sur l'échelle de BRADEN



LES + PRODUIT

- **Efficacité prouvée** : indiqué dans la prévention et l'aide au traitement des escarres (Stade 1 à 4)
- **Simplicité d'utilisation** : pour le personnel soignant avec un calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- **Fiabilité & coûts réduits** : produit éco-conçu, fabriqué en France, avec possibilité de maintenance autonome via le logiciel « AIRCARE »

Caractéristiques principales

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Décharges talonnières intégrées
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- Dimension matelas : 195 x 17 cm x [Largeur choisie]
- 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm
- 2 types de bases disponibles : mousse ou air
- Poids matelas : ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg)

Housse	Largeur de lit	Carton individuel	
		Base mousse	Base air
	90 cm	VAXT4/AUTO-P	VAXT4/AUTO-PA
	100 cm	VAXT4/AUTO100-P	-
	120 cm	VAXT4/AUTO120-P	-
	90 cm	VAXT4/CIC-P	VAXT4/CIC-PA
	100 cm	VAXT4/CIC100-P	-
	120 cm	VAXT4/CIC120-P	-

Possibilité de conditionnement multiple par 6 en carton box.

- QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- 2 housses disponibles : PROMUST PU HD et PROMUST CIC
- Etiquette de traçabilité au pied du matelas
- Passe-câble de série intégré
- Compatibilité Rehawash et machines barrières


* Uniquement pour l'Automorpho Plus base mousse

axtar automorpho® plus

alliant efficacité, confort & simplicité

DÉCHARGE TALONNIÈRE

- Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules au pied du matelas.
- Mise en décharge facile grâce à une vanne avec molette.

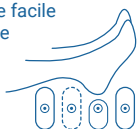


HOUSSE SÉRIGRAPHIÉE

- Bi élastique et imperméable au liquide et perméable à la vapeur d'eau, ignifugé.
- Rabat long pour une meilleure hygiène.
- Disponible en version **PROMUST PU HD** et **CIC**.

CELLULES

18 cellules en Polyuréthane.
Ensemble faisceaux-cellules amovible: facilite le nettoyage et la désinfection du matelas

- **Qualité**
- **Solidité**
- **Silencieuses**

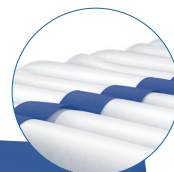

BASE ANTI-DÉRAPANTE

Permet d'éviter les sangles pouvant endommager les lits.



PASSE-CÂBLE DE SÉRIE

Ergonomique et totalement intégré*, pour une installation sécurisée et un nettoyage facile.

CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- Ouverture et fermeture simple et rapide.
- Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence.
- Manchon intégralement soudé*, minimise les risques de pénétration des fluides et facilite la décontamination.



2 MATELAS AU CHOIX

Base mousse de 5 cm de hauteur.
dans un caisson indépendant. Permet de garantir la sécurité du patient en cas d'événements indésirables.



ou

Base air de 8 cm de hauteur.
Souple, flexible, facile à nettoyer. Permet d'offrir une immersion profonde du patient.



1 compresseur

2 matelas au choix

La nouvelle polyvalence Axtair Automorpho® Plus

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Gestion de la position assise

- 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient
- Alarmes visuelles et sonores
- QR code «SCAN ME !» pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

DYNAMIC



Dynamique

STATIC



Statique
basse pression



Soins

Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 22 x 25 x 11,5 cm
- **Mode dynamique (aterné)** : 1 cellule sur 2
- **Temps de cycle complet** : 9 à 15 minutes
- **Brevet** : Système breveté de calcul automatique
- **Réglage** : Confort personnalisé
- **Débit** : > 7 l / min
- **Indice de protection** : IP42

- **Alimentation électrique** : 220-240 V~ 50 Hz
- **Classe** : Classe II type BF
- **Consommation moyenne** : 5 Wh
- **Pression acoustique** : < 35 dBA
- **Conformité électrique et électromagnétique** : Normes IEC 60601-1; IEC 60601-1-2

* Uniquement disponible sur la version Automorpho Plus base air

Photos non contractuelles

