


Gamme axensor®



		 AXENSOR AT 12 AXENSOR AT 15		 AXENSOR AT 15 DV	 AXENSOR AT 20	 Coussin Axtair
Référence matelas	largeur 80 cm	VAXT6/AUTO-80-S	-	-	VAXT6/AT20-80-S	VAXT6/CO/AUTO
	largeur 90 cm	VAXT6/AUTO-S	VAXT6/MAX-S	VAXT6/MAX-DV-S	VAXT6/AT20-90-S	
Compresseur		<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 22 x 25 x 11.5 cm • 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins. (pour le coussin axensor, seul le mode dynamique est disponible en mode connecté) • Mode dynamique (alterné) : 1 cellule sur 2 • Temps de cycle complet : 17 à 20 min • Réglage automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient • Verrouillage automatique du clavier • Alarmes : visuelles et sonores • Débit > 8 l/min. / 220-240 V~ 50 Hz / Classe II type BF ; • Consommation moyenne : 5 Watts / Puissance acoustique < 35 dBA • Conformité électrique et électromagnétique selon les normes EN 60601-1 et EN 60601-1-2 • Indice de protection IP42 <p>Réf. : VAXT6/POMPE/AUTO-S</p>				
Hauteur Air		12 cm	15,5 cm	15,5 cm	20 cm	10 cm
Base mousse		Support en mousse polyéther amovible de 5 cm situé dans un compartiment indépendant				✘
Dimensions	largeur 80 cm	195 X 80 X 17 cm	-	-	195 X 80 X 20cm	45 X 45 X 10 cm
	largeur 90 cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	197 X 87 X 20cm	
Largeur de lit		90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	-
Poids patient		30 à 165 kg	30 à 180 kg	30 à 180 kg	30 à 200 kg	30 à 150 kg
Vanne CPR		✔	✔	✔	✔	✘
Normes feux		 EN 597 PARTIES 1 & 2 GPEM D1-90 & D1-89 bis				

Axtair Automorpho axensor[®] AT 20



Disponible en largeur 90 cm.

30 ≤ 200 kg



VANNE CPR LATÉRALE
(Cardio Pulmonary Rescue)

Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque.



2
ANS
GARANTIE

A commander sur le site (30) Nîmes

automatic
technology
BREVET

COMPATIBLE
PROGRAMME
AI Care[®]



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

LES + PRODUIT


- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

Caractéristiques principales

- 21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm
- Vanne CPR d'urgence latérale
- 4 zones thérapeutiques:
 - 2 cellules de tête statiques
 - 4 cellules cervico-dorsales
 - 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
 - 5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles par l'extérieur
- Passerelle câble



- Capteur gyroscopique Axensor pour ajuster automatiquement la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et sa position au lit

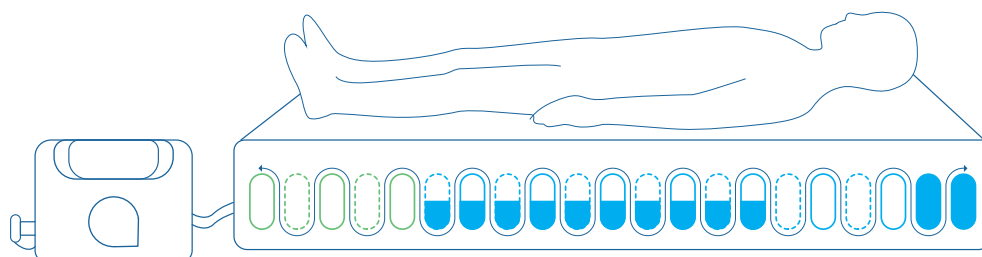

Photos non contractuelles