



LUNA® X5

ENSEMBLE, ÉLEVONS LE SOIN

DESIGN . SIMPLICITÉ . DURABILITÉ . ÉCOCONCEPTION



Découvrez le LUNA® X5

Le LUNA® X5 est conçu pour s'intégrer de manière **discrète, élégante et harmonieuse** dans toutes les chambres. Son concept tout-en-un (fixe, portable et capacité de levage multiple) et sa **grande amplitude de levage** offrent une flexibilité qui suit l'évolution de vos besoins.

Son **intuitivité** simplifie le quotidien des soignants et des équipes techniques, tout en garantissant **sécurité et confort** aux résidents.

Fiable et nécessitant peu de maintenance, à **coûts maîtrisés**, le LUNA® X5 réduit votre coût total de possession et maximise votre retour sur investissement. Son **éco-conception** exclusive et ses rails en **aluminium recyclé** limitent votre empreinte environnementale.

Caractéristiques techniques

Charge maximale d'utilisation : 150, 200 ou 275 kg

Longueur sangle de levage : 2500 mm

Poids : 5,2 kg sans cintre

Dimensions : Ø 320 x H 130 mm

Batterie : 36V NiMH | **Chargeur** : 100-240V, 0,3A

Coque : Moulage ABS avec renfort

Niveau sonore :

- Pendant la montée/descente à vide : 49dB(A)
- Pendant la montée/descente avec une charge de 175 kg ou plus : 53dB(A)

Temps de charge : approx. 5 heures pour charge complète sur batterie vide

Vitesse de montée/descente

- 42 mm/sec. pour une charge de 15 à 275 kg.
- 90 mm/sec. pour une charge de 0 à 15 kg.

Nombre de cycle par charge : approx. 80 cycles à 90kg

Indice de protection :

Moteur : IPX4 | Télécommande : IPX7

Durée de vie : 20 ans ou 30.000 cycles

Garantie 5 ans

Avantages



Élégant, discret et adaptable

- **Système tout-en-un** : modes fixe et nomades combinés en un seul moteur, avec une capacité de charge ajustable (150, 200, 275 kg).
- **Hauteur de levage inégale** : nouveau design du moteur compact, avec une sangle de levage haute portée (2500 mm – permet de relever au sol).
- **Compatible avec le recharge permanente** : moteur toujours chargé et prêt à l'emploi. Peut être mis en place sur des installations existantes.



Simple et sûr à utiliser, pour des soins encore améliorés.

- **Intuitif** : bouton d'arrêt d'urgence et de descente d'urgence directement intégrés à la télécommande, accessibles en quelques secondes.
- **Sécurité intégrée** : crochets brevetés du cintre pour une installation sûre des harnais (les crochets se ferment automatiquement sous le poids du résident).
- **Suivi de l'adoption et d'utilisation** : logiciel de suivi des données de maintenance permettant d'extraire en temps réel des informations d'usage (arrêts d'urgence, décharges, maintenance, etc.).



Optimisation du coût de possession et de votre retour sur investissement.

- **Composants durables, de haute qualité et réparables** pour une fiabilité accrue et un coût total de possession minimisé.
- **Smart maintenance (exclusivité)** : crochet et câble de la télécommande facilement remplaçables.
- **Maintenance rapide du moteur** : en moins de 5 minutes avec un seul tournevis.
- **Indicateur de maintenance** sur le panneau latéral.



La 1ère solution pensée pour un impact environnemental minimal.

- **Rails composés à 75% d'aluminium recyclé** post consommation, réduisant l'empreinte carbone de 66%.
- **Moteur écoconçu**.



WINNOCARE


SCEMED BY WINNOCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin | Tél. : 03 20 28 04 28 | Email : contact.scemed@winncare.fr



Dimensions

Mesures
identiques
en mode fixe
et nomade

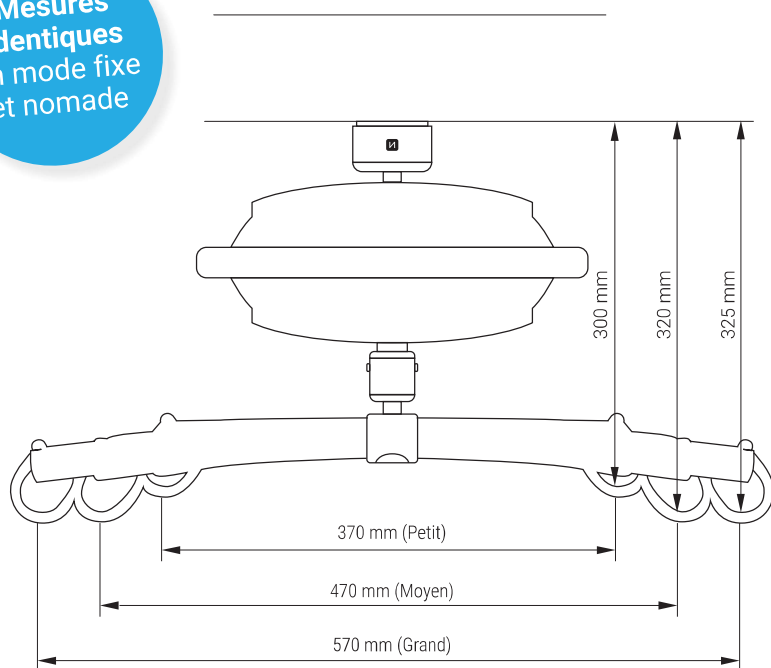


Références

Produit	Référence
LUNA X5 - mode fixe livré avec chargeur, station de charge, cintre 2pts et télécommande IPX7	20410080
LUNA X5 - mode nomade livré avec chargeur, cintre 2pts et télécommande IPX7	20410081
Chariot de transport et stockage LUNA X5 livré avec bras d'extension télescopique 1m/1,8m	20410083
Chargeur pour LUNA X5 (avec station de charge)	20410051
Télécommande pour LUNA X5 - 1080cm	20410052
Télécommande pour LUNA X5 - 1320cm	20410061
Télécommande 2 voies pour LUNA X5 - 1080cm	20410062
Télécommande 2 voies pour LUNA X5 - 1320cm	20410063
Chargeur LUNA X5 (sans station de charge)	20410057
Cintre universel LUNA X5 - 37cm	20410058
Cintre universel LUNA X5 - 47cm	20410053
Cintre universel LUNA X5 - 57cm	20410059
Cintre 3 points LUNA X5	20410060



Une nouvelle génération pleine de nouvelles fonctionnalités, mais qui conserve notre design signature, élégant.

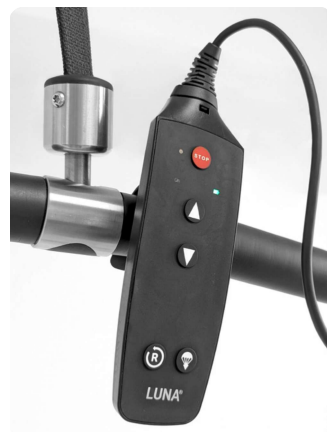

Télécommande intuitive, avec un bouton d'arrêt d'urgence intégré et un système de maintenance optimisé.



Station de recharge murale, qui garantit que la télécommande reste bien en place pour la charge du moteur.



Pour plus d'informations, veuillez contacter SCEMED BY WINNCARE : contact.scedmed@winncare.fr
Toutes les données et mesures sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'utilisation.
Scedmed by WinnCare se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires et sont non contractuelles.



SCEMED BY WINNCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin | Tél. : 03 20 28 04 28 | Email : contact.scedmed@winncare.fr